



24/10 GENESI M

Cod. D-GE150-024-M

Oil free compressor, FAD at 5 bar 135 l/min, tank capacity 24 L with air dryer.


Utilisation simultanée maximale: 1

Nombre d'unités: 2

Medical Device CE 0425

| sSécheur | Capacité en air | Débit à @ 5bar | Moteur | Tension Hz | Réservoir | Niveau sonore | ာ့္ပြဲ Cycle de marche | max P. | Taille | kg Poids net |
|----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| Oui | m³/min l/min 0.182 182 | m³/min l/min 0.135 135 | kW 1.1 | 230V 50Hz | ا 24 | db(A) 65 | 50 % | bar | mm 500x420x600 | Kg 33 |

Performances de livraison d'air

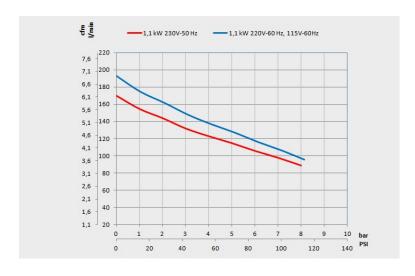





Kit de maintenance

| Kit | Description | Туре | Heures |
|-----------------|--|----------------|-----------|
| TA-FL-024-K-SCC | Kit d'entretien courant GENESI M Kit d'entretien ordinaire pour compresseurs GENESI, avec sécheur. Le kit comprend les cartouches de la batterie de filtration du sécheur (2 cartouches : 5 + 0,01 micron) et les joints toriques correspondants, le filtre d'aspiration de l'élément de pompage et le tampon du clapet anti-retour. Le remplacement annuel des composants du kit est recommandé. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale. | Ordinaire | 1.000h/1y |
| MG-GC-011-K | Kit d'entretien extraordinaire GENESI S et M Le kit de pièces détachées d'entretien extraordinaire GENESI comprend : un filtre d'aspiration, deux bagues élastiques, des joints toriques, une cartouche filtrante de ligne et deux plaques à clapets complètes. Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 1 500 heures / 2 ans. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale. | Extraordinaire | 1.500h/2y |